

## セラムピーリング美顔器のポイント

薄型で  
軽量！

ヘッド部分は  
傷に強い  
ステンレス製！

しっかり  
毛穴洗浄！

ハリ・ツヤ  
透明感

コードレス  
機能で  
使いやすい！

リフトアップ



MIYAKO SERUM PEELING



美容液で  
お肌に  
ピーリングと潤い！

## MIYAKO SERUM PEELING ミヤコセラムピーリング

【製品名】 ミヤコセラムピーリング

【電源】 充電式

【充電時間】 約2時間

【機能】 ピーリング（超音波洗浄）・イオン導出・  
イオン導入・マイクロカレント

【製品サイズ】 縦170mm × 横55mm × 厚さ15.5mm

【本体重量】 94g

希望小売価格：14,080円（税込15,488円）

販売元

株式会社 AVANT BEAUTY (アバンビューティー)

〒615-0022 京都府京都市右京区西院平町19番地

0120-125-222



セラムピーリングで  
美肌力UP

セラム  
ピーリング

イオン  
プラス  
導出

1台4役のプロ級エステケア

マイクロ  
カレント  
マッサージ

イオン  
マイナス  
導入


## SERUM PEELING

ミヤコセラムピーリング

超音波で毛穴に詰まった皮脂やメイク汚れを取り除く！

### セラムピーリング

洗顔では取れない毛穴の奥の汚れを毎秒24,000回の超音波の振動でミスト状になった化粧水が毛穴に入り込み、汚れを浮き上がらせて古い皮脂などを取り除き、潤いも同時に与えています。

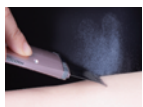

高速振動でミスト状にし汚れを効果的に取り除きます。



イオンプラス導出でマイクロな汚れを吸着！

### イオンプラス導出


さらにプラスイオン（電気力）で汚れを浮かせていきます。



イオンマイナス導入（電気力）で美容液を肌にチャージ！

### イオンマイナス導入

マイナスイオン（電気力）で、美容液の有効成分をお肌の奥に届けます。

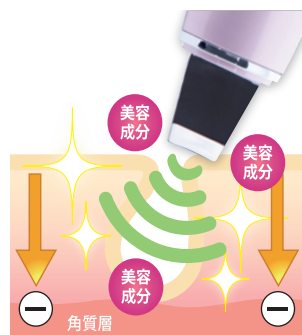

マイクロカレント（微弱電流力）でリフトアップ！

### マイクロカレントマッサージ



微弱電流（マイクロカレント）でお肌をマッサージします。

#### マイクロカレントとは

微弱電流のことで微細な電流をお肌に流すことで細胞や筋肉などの活性化を助けてくれます。お顔のシミやしわ、小顔などの美肌効果が期待できます。

## セラムピーリング使用方法

1



クレンジング洗顔でメイクを落とし、水気をしっかり拭き取ってください。

2



専用の化粧水をコットン又は手に取りお顔全体にたっぷり塗布します。（乾いたお肌への使用は絶対にしないでください）

3



お好きなモードを選択して、本体機の両側の電極部分を握りながらお手入れします。

4



お顔の下から上に向かって45度の角度で引き上げながら動かします。